


アイスクールスティック(氷のう)

TUM01

取扱説明書

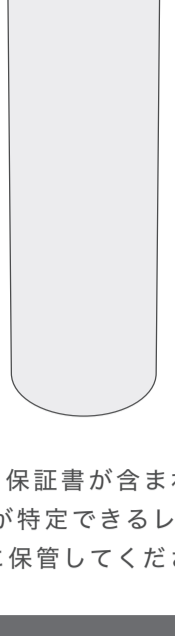


本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。



絶対に入れないでください

- ・水、氷、または70℃以下のお湯以外のものを入れない。
- ・ドライアイスを入れない。

各部名称

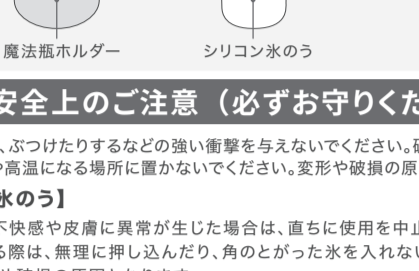

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- 落としたり、ぶつけたりするなどの強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 火のそばや高温になる場所に置かないでください。変形や破損の原因となります。

【シリコン氷のう】

- 使用中に不快感や皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 氷を入れる際は、無理に押し込んだり、角のところがたがった氷を入れないでください。内側が傷つき、漏れや破損の原因となります。
- 規定量以上の水を入れて凍らせしないでください。破損の原因となります。
- 横向きや逆さまの状態を冷凍しないでください。漏れや破損の原因となります。
- 熱湯を入れてしないでください。やけどや破損の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に放置しないでください。劣化の原因となります。
- シリコン氷のうおよびキャップの表面が結露する場合があります。周囲のものを濡らすことがあります。
- 水、氷、またはお湯を入れたまま保管したり、使用後に長時間放置しないでください。腐敗・変質や臭いの原因となります。
- キャップを開閉する際は、シリコン氷のう本体(シリコン部分)を持たないでください。漏れや破損の原因となります。

【魔法瓶ホルダー】

- 冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。破損の原因となります。
- バッグなどに入れる際は、縦向きにしてください。横向きにすると漏れの原因となります。
- キャップは確実に閉めて使用してください。
- パッキンは必ず取り付けた状態で使用してください。
- 使用中にキャップを開ける際は、キャップと内ふたの間に水がたまっている場合がありますのでご注意ください。

使用方法

<氷と水の規定量>

氷や水は図の規定量までにしてください。
入れすぎると、吹き出しやシリコン破損の原因となります。



【水を入れて凍らせて使う場合】

- ①シリコン氷のうに水を規定量まで入れ、キャップをしっかりと閉める。

※キャップの開閉時は、シリコン部分を持って開閉しないでください。破損や中身が飛び出すおそれがあります。

- ②凍らせる。

シリコン氷のうを必ず立てた状態で、魔法瓶ホルダーに入れて凍らせてください。

- ③魔法瓶ホルダーに入れて、キャップをしっかりと閉める。

- ④冷やしたい部分にあてる。

シリコン氷のうを取り出し、冷やしたい部分にあててご使用ください。使用しないときは魔法瓶ホルダーに入れて保管してください。保冷効果により、氷が長持ちします。



【水と氷を入れて使う場合】

- ①シリコン氷のうに、水と氷を規定量まで入れ、キャップをしっかりと閉める。

シリコン氷のうの規定量まで氷を入れてください。次に水を入れてください。氷が入りにくい場合は角をくたくか、水で表面を濡らして滑りやすくしてください。

- ②魔法瓶ホルダーに入れて、キャップをしっかりと閉める。

- ③冷やしたい部分にあてる。

シリコン氷のうを取り出し、冷やしたい部分にあててご使用ください。使用しないときは魔法瓶ホルダーに入れて保管してください。保冷効果により、氷が長持ちします。




使用方法

【お湯を入れて使う場合】

- ①シリコン氷のうに、お湯(70℃以下)を規定量の2/3程度まで入れ、キャップをしっかりと閉める。

【お湯を入れる際の注意】


- ・70℃を超えるお湯は、やけどや製品破損の原因となるため使用しないでください。
- ・規定量の2/3を超えて入れると、キャップを閉めた際にお湯があふれるおそれがあります。入れすぎにご注意ください。
- ・直火や電子レンジでは使用しないでください。
- ・お湯を注ぐ際は、やけどに注意してください。シリコン部分が熱くなるため、タオルを巻くか、プラスチック部分を持ってください。
- ・キャップを閉める際は、シリコン上部のプラスチック部分を持ち、矢印の方向に回して閉めてください。
- ・キャップはしっかりと閉め、お湯が漏れないことを確認してください。

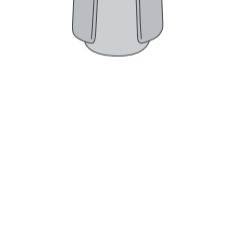

- ②魔法瓶ホルダーに入れて、キャップをしっかりと閉める。

- ③温めたい部分にあてる。

シリコン氷のうを取り出し、温めたい部分にあててご使用ください。使用時はやけどにご注意ください。使用しないときは魔法瓶ホルダーに入れて保管してください。保温効果により温かさが長持ちします。

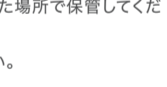

お手入れ方法

ご使用後は、においの発生を防ぐため、必ずその日のうちにお手入れをしてください。
お手入れの際は、必ずやわらかいスポンジをお使いください。

■シリコン氷のう

- ・使用後は中身を捨て、十分に乾燥させてからキャップを閉め、乾燥した場所で保管してください。
- ・表面の汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いしてください。

■キャップ、魔法瓶ホルダー

- ・スポンジに中性洗剤を含ませて洗い、ぬるま湯または水で丸洗った後、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

■パッキン

- ・パッキンをキャップから取り外し、ぬるま湯または水で丸洗った後、乾いた布で水分を拭き取ってください。その後、キャップに確実に取り付けてください。
(パッキン表面にゴミが付着している、または正しく取り付けられていない場合、水漏れの原因となります。)

【お手入れ上の注意】

- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。サビや穴あきなど、故障の原因となります。
- ・魔法瓶ホルダーの外側には漂白剤を使用しないでください。サビや塗装はがれのおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジン、金属たわし、クレンザー、台所用以外の洗剤は使用しないでください。傷やサビなど、故障の原因となります。
- ・丸洗いはできますが、つけ置き洗いはしないでください。
- ・煮沸および食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。傷、サビ、変形、水漏れなど故障の原因となります。
- ・長期間使用しない場合は、よくお手入れをして汚れを落とし、十分に乾燥させてから、高温多湿を避けて保管してください。

製品保証書

- この保証書は購入時点から正常に使用できない場合に限り無償で交換を保証するものです。
- 使用上の注意に記載されている使用方法に沿わない場合の破損は保証対象外です。
- 本製品の使用によるデータの変化や消失等の直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失等)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンター(<https://motteru.co.jp/contact>)メールフォームへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。

保証

初期不良のみ

お買い上げ日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店印・レシート添付欄

保証書無効

- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T25M053-01

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問合せください。MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

サポート受付 10時~12時/13時~17時 平日のみ

電話番号 046-200-7090

メールアドレス support@motteru.co.jp



保証サポート・製品についてのご質問などは、こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。

@motteru サポート公式アカウント
二次元コードから友達追加でお問い合わせいただけます。

@131jnnre

\ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

@225sgyqq

motteru_enjoy

@motteru_enjoy

@motteru_enjoy

フォロー & いいねをお願いします！